

S Y N C A

家庭用


保管用

保証書付き

取扱説明書

KAURI
リラックスロッキングチェア

品番 BM350

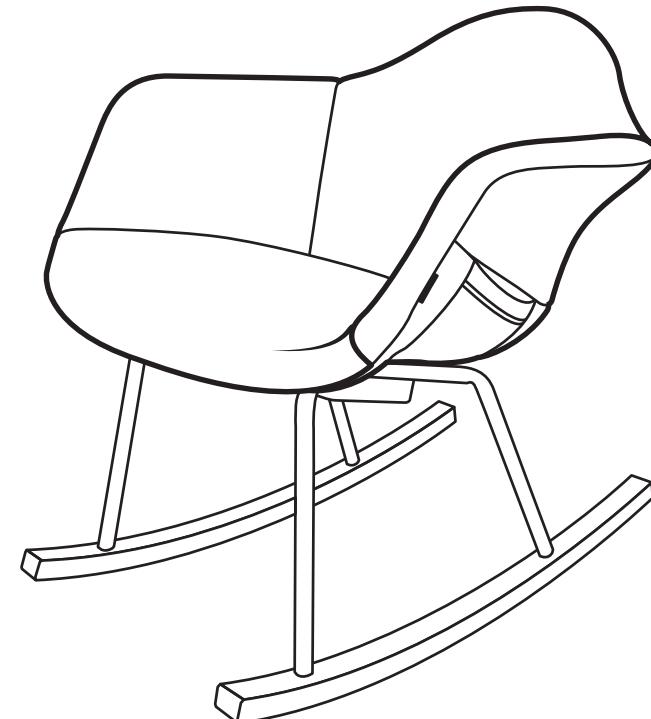

もくじ

安全上のご注意	3
各部の名称	7
組み立てかた	8
使いかた	9
お手入れと保管方法	11
故障かな?と思ったら	12
愛情点検	13
定格・仕様	13
保証とアフターサービス	14
保証書	15
ユーザー登録のお願い	16

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

本体および付属品を廃棄するときは、

お願い

地方自治体の条例または規則に従って処理してください。

詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。



●医師の治療を受けている人や次のような人は必ず医師に相談のうえ使用してください。

守らないと事故やけがや体調不良をおこすことがあります。

◎ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人

◎悪性しゅよう(腫瘍)のある人

◎心臓に障害のある人

◎妊娠中や出産直後の

◎糖尿病などによる高度な末梢(梢)循環障害による知覚障害のある人

◎骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人

◎施療部位に創傷のある人

◎安静を必要とする人や著しく体調の

すぐれない人

◎背骨に異常のある人、左右に曲がっている人

◎つい(椎)間板ヘルニア症の人

◎けん(腱)鞘炎の人

◎過去に治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人

◎その他医療機関で治療中の

◎上記以外に身体に特に異常を感じているとき

●ご使用中身体に異常があらわれたり感じたりしたときや、使用しても効果があらわれない場合には、ただちにご使用を中止し医師に相談してください。

守らないと事故や体調不良をおこすことがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前に、必ず布カバーなどに破れや外れがないか確認してください。どんな小さな破れでも、ただちにご使用を中止し、電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで修理を依頼してください。 <p>カバーが破れたり外れたりした状態で使用すると感電や火災のおそれがあります。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●感染症【皮下組織の炎症を含むなど】は使用しないでください。 症状を悪化させるおそれがあります。 ●自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させないでください。 事故や火災のおそれがあります。 ●子供に使わせたり、本体の上で遊ばせたりしないでください。 また、ご使用中は子供を近づけないでください。 事故や火災のおそれがあります。 ●専用ACアダプタや電源コード以外は使用しないでください。 (品番:TP06-240270W) 火災や故障の原因になります。 ●専用ACアダプタや電源コードに対し次の行為を行わないでください。 ○破損 ○加工 ○束ねた状態で使用する ○重いものをのせたり、挟み込んだりする ○無理な力を加える(曲げる、引っ張る、ねじる、巻きつけるなど) 傷んだまま使用すると、感電やショートや火災の原因になります。 専用ACアダプタや電源コードの修理は、カスタマーセンターにお問い合わせください。 ●専用ACアダプタや電源コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電やショートや発火の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードは根元まで確実に差し込んでください。また、ごみを付着させないでください。 守らないと感電や火災の原因になります。 ●専用ACアダプタや電源コードのほこりなどは定期的にとってください。(ほこりは乾いた布でふいてください) 守らないと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮ふ炎および皮ふ 		

⚠ 警告

 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解や修理、改造をしないでください。 火災や感電や事故やけがの原因になります。 <p>修理はカスタマーセンターにお問い合わせください。</p>	 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で、専用ACアダプタや電源コードの抜き差しをしないでください。 感電や事故やけがのおそれがあります。
---	---	--	---

⚠ 注意

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前には、この取扱説明書に従いボタンが正常に動作することを確認してください。 守らないと事故やけがのおそれがあります。 ●一日のご使用の目安は30分以内にしてください。 守らないと逆効果やけがの原因となります。 ●健康な方でも次のような人は必ず医師と相談のうえ使用してください。 ○加齢により筋肉の衰えた人やそう(瘦)身の人 ○骨や内臓に起因する腰痛の人 ○打ち身やねんざしやすい人 ○乗り物酔いの激しい人 ○過去に心臓や内臓の手術をされた人 守らないと健康を損なうおそれがあります。 ●ご使用中身体に異常を感じたときや効果があらわれない場合は、ただちにご使用を中止し医師に相談してください。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。 ●お手入れの際は、必ず電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで行ってください。 感電やけがのおそれがあります。 ●停電の時はただちに電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いてください。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●持て抜いてください。 守らないと感電やショートや火災の原因になります。 ●動かなくなったり異常を感じた時はただちにご使用を中止し、電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで、必ずカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。 守らないと感電や漏電やショートなどによる火災のおそれがあります。 ●ご使用中、ご使用後に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、ご使用を中止し、医師に相談してください。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
---	---	---	---

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意



必ず守る

- 長時間使用しなかった場合は専用ACアダプタや電源コードに異常がないことを確認し、ご使用前にもう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常にかつ安全に動作することを確認してください。

事故やけがのおそれがあります。

- ご使用にならないときは必ず電源ボタンを「OFF」にし、専用ACアダプタや電源コードを抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災、子供のいたずらなどによる事故の原因になります。



禁止

- 他の治療器と同時に使用しないでください。

事故や体調不良のおそれがあります。

- 飲酒後は使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

- ご使用中眠らないでください。

事故やけがのおそれがあります。

- 食後すぐに使用しないでください。

気分が悪くなるおそれがあります。



禁止

- 二人以上で使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

- 素肌で使用しないでください。


皮膚を痛めることができます。

- 動作中に専用ACアダプタや電源コードを抜かないでください。

けがのおそれがあります。

- ホットカーペットなどの暖房機器の上やストーブなどの火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用したりしないでください。


各部の名称

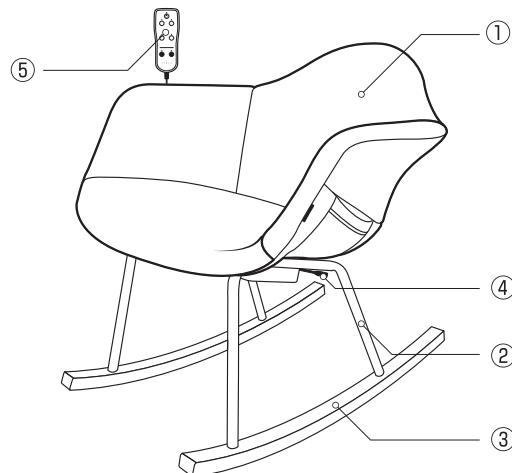

本体


①	チェア本体
②	チェアフレーム
③	チェアレッグ
④	電源コネクタ
⑤	コントローラー
⑥	背部エアバッグ
⑦	側面部エアバッグ
⑧	座部エアバッグ

専用ACアダプタ (品番:TP06-240270W)

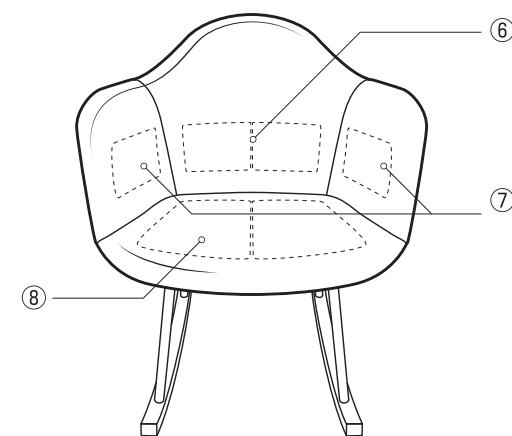


付属品

⑫	組み立てボルト × 9本(うち1本は予備)
⑬	着脱式ストッパー × 4本
⑭	六角レンチ

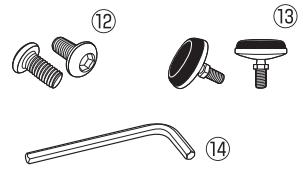

警告

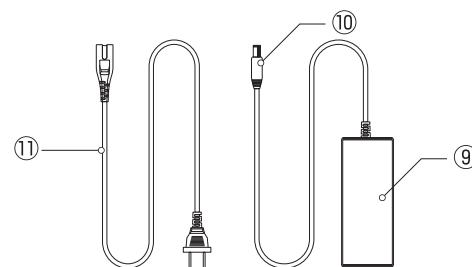

禁 止	●専用ACアダプタ以外は使用しないでください。 火災や故障の原因になります。
--------	---

組み立てかた

組み立て前の準備


梱包されている本体・専用ACアダプタ・付属品がすべてそろっているか確認する。

- 開梱・組み立ての際は本体の周囲に人やペットがないことを確認してください。
また、床などにキズがつかないよう毛布などを敷いて組み立て作業を行ってください。

組み立てかた

- 1 チェア本体を裏返し、付属の六角レンチを使い下図の通りチェアレッグ・フレームをボルトで仮止めする。きちんと組み合わさったことを確認し、再びすべてのボルトをしっかりと締め固定する。

- 組み立ては二人以上で行ってください。
- 組み立ての際は、ボルト穴に対してボルトをまっすぐ差し込んでください。無理に締め付けるとボルト穴がつぶれ、ボルトが入らなくなることがあります。

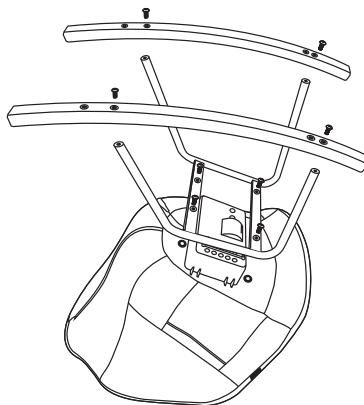

チェアアシを固定して使用する場合

チェアを固定する場合には、付属のストッパーをチェアレッグ裏のボルト穴に取り付けてください。



※根元までしっかりとねじ込んでください

- 2 本体の設置や移動の際には、本体の周囲に人やペットがないこと、物がないことを確認して設置する。

- たたみや床をキズつけることがありますので、本体の下にマットを敷くことをおすすめします。

注意



- 必ず守る
- 取扱説明書の組み立て方の記載に従い組み立ててください。
守らないと破損やけがのおそれがあります。

使いかた


※1日の使用は30分以内にしてください。

ご使用前の準備


- 1 布カバーの破れや外れがないか確認する。

- どんな小さな破れや外れでもただちに使用を中止し、電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで、修理を依頼してください。


- 2 電源コードをコンセントに差し込む。

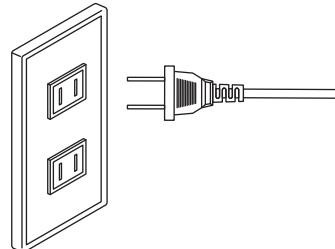

- 3 専用ACアダプタに電源コードを差し込む。

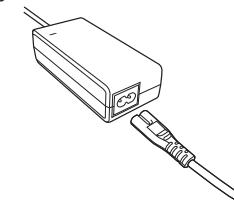

- 4 本体の電源コネクタに専用ACアダプタのプラグを差し込む。

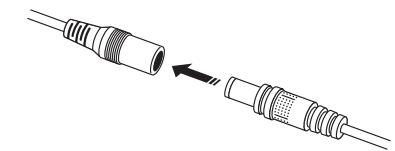

警告



- 必ず守る
- コンセントや配線器具の定格を守り、交流100Vで使用してください。
(海外での使用や変圧器を用いた使用はできません)
守らないと感電や故障や発熱による火災の原因になります。
 - 破損している電源コネクタや専用ACアダプタや電源コードを使用しないでください。
感電やショート・発火の原因になります。
破損している場合はカスタマーセンターに修理を依頼してください。
 - 電源コネクタや専用ACアダプタや電源コードを根元まで確実に差し込んでください。また、ごみを付着させないでください。
守らないと感電や発熱による火災の原因になります。



- 必ず守る
- 長時間使用しなかった場合は専用ACアダプタや電源コードに異常がないことを確認し、ご使用前にもう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常にかつ安全に動作することを確認してください。
事故やけがのおそれがあります。

注意


使いかた

※1日の使用は30分以内にしてください。

使いかた

1 Ⓛを押して電源を入れる。

2 フルコース・腰・おしり・骨盤集中から、お好みのコースを選択。

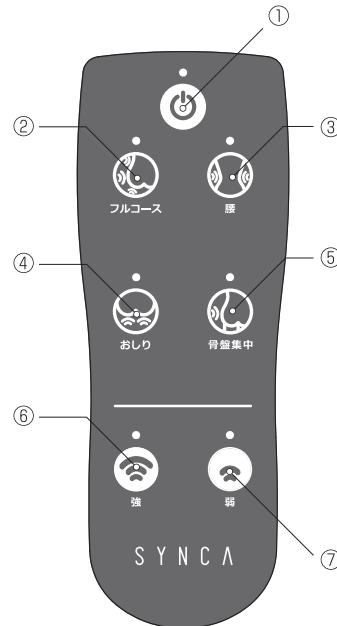

① 電源ボタン	使用後は電源を「OFF」にしてください。
② フルコースボタン	腰・おしり・骨盤すべてをエアバッグでケアします。
③ 腰ボタン	背部と左右側面のエアバッグで、腰まわりをケアします。
④ おしりボタン	座部のエアバッグでおしり全体をケアします。
⑤ 骨盤集中ボタン	左右側面のエアバッグを中心に骨盤まわりをケアします。
⑥ 強ボタン	エアバッグの強弱を調整します。
⑦ 弱ボタン	

●10分後に自動でコースが終了します。

⚠ 警告



●ご使用時以外は必ず電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いてください。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

お手入れと保管方法

お手入れ

①お手入れの際は、必ず電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで行ってください。

②乾いたやわらかい布で汚れをふきとってください。

③汚れがひどい場合は、水を布に含ませて固くしぼり、汚れをふきとってください。

④乾いた布でふき、自然乾燥させてください。

●布カバーは洗えません(着脱できません)

保管方法

製品を清潔に保ち直射日光・高温・多湿・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

●保管する前に、本製品のほこりと汚れをふきとってください。

●長期間本製品を使用しない場合は、製品にカバーをかぶせて保管してください。

●直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。変色・変質の原因になります。

⚠ 警告



●ぬれた手で、専用ACアダプタや電源コードの抜き差しをしないでください。
感電や事故やけがのおそれがあります。

⚠ 注意



●お手入れの際は、必ず電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いたうえで行ってください。
感電やけがのおそれがあります。

●ご使用にならないときは必ず電源ボタンを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災、子供のいたずらなどによる事故の原因になります。

●電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持って抜いてください。

守らないと感電やショートや火災の原因になります。



●ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、薬剤を含んだスプレーをかけないでください。
感電や引火の原因になります。

●布カバーのアイロンかけはしないでください。
生地を傷めるおそれがあります。

●浴室など湿気の多いところで使用したり保管したりしないでください。
火災や感電、故障、カビの原因になります。

故障かな?と思ったら

- ご使用中の以下のような音や感覚は、機械の構造によるもので異常ではなく、製品の寿命などには影響ありません。
 - ・エアバッグ動作中のポンプ音
- 縫製の特性上、部分的に軽微なしわやたるみが生じる場合がありますが不良ではありません。
- 生地の特性上、においを感じる場合がありますが、異常ではありません。

⚠ 警告



- 絶対に分解や修理、改造をしないでください。
火災や感電や事故やけがの原因になります。

こんなとき	考えられる原因	対処方法
電源を入れても機械が動作しない	電源コードが抜けている	電源コードをコンセントに差し込んでください
	電源コネクタと専用ACアダプタのプラグが抜けている	電源コネクタに専用ACアダプタのプラグを差し込んでください
	電源ボタンが「OFF」になっている	電源ボタンを「ON」にしてください
	外部からのノイズによる影響があった	電源コードを差し直してください
	電源コードとコンセントの接触不良	電源コードをコンセントにしっかりと差し込んでください
	ブレーカーが落ちている	ブレーカーを上げてください。それでもブレーカーが落ちる場合は、カスタマーセンターにお問い合わせください
動作が途中で止まる	長時間連続で使用したため、安全装置が作動し停止した	1時間程度電源コードをコンセントから抜いた後、もう一度初めから操作し直してください
破損してしまった		
専用ACアダプタや電源コネクタが異常に熱い		事故防止のため、電源コードを抜いたうえで、カスタマーセンターにお問い合わせください

上記対処を行っても正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、電源コードをコンセントから抜いたうえで、カスタマーセンターにお問い合わせください。

愛情点検

⚠ 注意

- しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本製品が正常に動作することを確認してから使用してください。
事故やけがのおそれがあります。

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- 専用ACアダプタや電源コネクタが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がある。
- 電源を「ON」にしても、時々動作しない事がある。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

長年ご使用の製品の点検を！

ご使用中止

電源コードをコンセントから抜いたうえで、カスタマーセンターにお問い合わせください。

定格・仕様

販売名	リラックスロッキングチェア
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格電力	30W
定格時間	約10分
寸法	約W640 × D700 × H670 [mm]
質量	約7.5 [kg]
材質	チェアレッグ:木、チェアフレーム:PP、鉄 布カバー:ポリエステル、ポリウレタン
耐荷重	90 [kg]
販売元	ジョンソンヘルスケア株式会社
製造国	中華人民共和国

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(12ページ)をご確認のあと、直らないときは、専用ACアダプタ本体を抜いたうえで、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 販売名 リラックスロッキングチェア
- 品番 BM350
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って本体のみ無料修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から 1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料：診断・修理・調整・点検などの費用

部品代：部品および補助材料代

出張費：技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間

3年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後3年保有しています。

カスタマーセンターのご案内

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、カスタマーセンターにお問い合わせください。

フリー
ダイヤル  0120-000-677

受付:月曜日～金曜日 10:00～12:00

13:00～17:00

※ただし、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

カスタマーセンターにおける個人情報のお取扱いについて

ジョンソンヘルスケア株式会社は、お客様の個人情報を、ご相談や修理対応などに利用し、ご相談内容は録音させていただきます。また、お客様に折り返し連絡をさせていただく場合のためにナンバーディスプレイ表示を採用していますので、あらかじめご了承ください。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、カスタマーセンターにご連絡ください。

保証書

この保証書は、「無料修理規定」に基づいて無料修理を行なうことを約束するものです。下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご準備のうえ、カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売名	リラックスロッキングチェア BM350
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (本体のみ)

お客様ご記入欄	
お名前：	様
ご住所：	
電話番号：	() -
メールアドレス：	

販売店記入欄	
販売店名：	
住所：	
電話番号：	() -
お買い上げ日	年 月 日

※上記欄に、販売店名、住所、電話番号、お買い上げ日を必ずご記入ください。

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合にはカスタマーセンターにお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
- 二. 一般家庭以外(例えは業務用など)に使用された場合の故障および損傷
- ホ. 本書の呈示がない場合
 - ヘ. 上記、お客様ご記入欄・販売店記入欄の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、カスタマーセンターにお問い合わせください。



(のりづけ)

ユーザー登録のお願い

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

保証書に記載のサービスを受けていただくために、ユーザー登録が必要となります。

お手数ですが、製品購入後右記ユーザー登録ハガキに必要事項をご記入のうえ、キリトリ線に沿って切り取り返送してください。

※恐れ入りますが、所定の郵便料金分の切手を貼付のうえ返送してください。

(のりづけ)

② 本紙の周辺部分に、のりを塗つてください

(のりづけ)

※
キリトリ線

① 下記項目をご記入ください

お買い上げ 年月日	西暦 年 月 日
製造番号	電子名：パナソニック・オーディオ・ブルーMD650 定格電源电压：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：30W <small>※製品本体裏側に貼付のラベルに記載された「製造番号」の後に続く番号です。</small>
M D 6 5 1 1	

(谷折り)

お名前	フリガナ
ご住所	〒 - 都道府県
お電話番号	
メールアドレス	

(のりづけ)

(のりづけ)

③ 点線を谷折りにして、この面を貼り合せてください

564-0044

(表面)



大阪府吹田市南金田2丁目2番7号

ジョンソンヘルスケア株式会社
カスタマーセンター行

恐れ入りますが所定
の郵便金分の手
をお貼りください

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本ユーザー登録は、ご購入製品についてのサポートおよびサービスの
提供のため、お客様の情報、ご購入時期、ご購入時期、ご購入入製品の製造番号を
弊社にて適切に管理する目的によるものです。
お客様からお預かりした個人情報は、弊社個人情報の取扱いについて
の考え方方に従い、適切に管理いたします。
ご記入後は、恐れ入りますが所定の郵便料金分の切手をお貼りいた
だいたいうえ、郵便投函いただきますよう、よろしくお願いいたします。

縦にアリサ

- memo -